

PALLAS bleu vert



140 Kg



Code article : **1020099S01**

Code GTIN : 3615800045785

Famille :

Aides à la marche

Description :

Canne anglaise haut de canne bi-matière poignée bleu vert RAL 5020, tube aluminium rond finition époxy bleu vert.

Usage revendiqué :

Aide à la marche manipulée avec un bras

Classe du dispositif : I

Garantie produit :

2 ans contre tout vice de fabrication

Code identification individuelle LPPR: 6259242

(CANNE METALLIQUE REGLABLE AVEC APPUI ANTEBRACHIAL OU POIGNEE EN T, ACHAT, VILGO)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur mini sol / poignée* : 735 mm
- Hauteur maxi sol / poignée* : 960 mm

→ plage de réglage : 225 mm (tous les 25 mm)

* position médiane sur poignée

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 20g

Description technique

- Haut de canne bi-matière en polypropylène, poignée TPE
- Mât : tube en aluminium Ø 22,5x1 (roulé soudé-5086) – L= 570 mm
2 positions de réglage
- Rallonge : tube en aluminium Ø 20x1 (roulé soudé-5086) – L=490 mm
5 positions de réglage
- Finition tubes : époxy bleu vert RAL 5001
- Bague anti-jeu entre mât et rallonge
- Embout anti-bruit
- Blocage réglage en hauteur par clip
- Embout Optiflex noir

- Emballage par paire en **poche Vilgo 300x1250**

Poids du produit :

0,5 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Prévue février 2022

version mise sur le marché à partir de

Etiquetage produit


Vignette CE



PALLAS bleu vert



Liste des pièces :

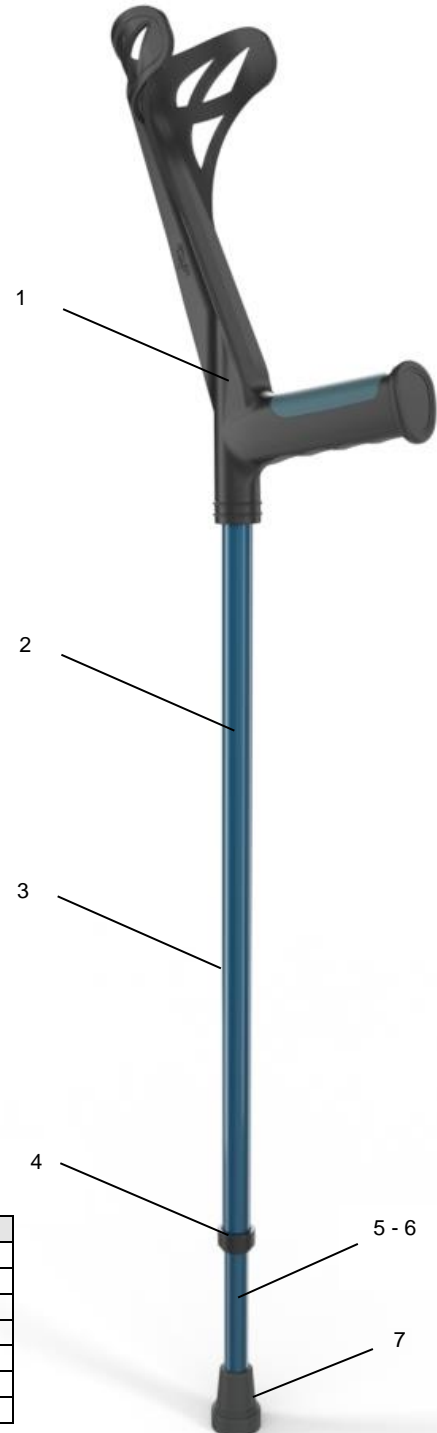

N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A102087	1	Haut de Pallas bleu vert 5020
2	E102036	1	Mât époxy (tube alu Ø22.5x1- L=570 – 2 trous)
3	A000126	1	Clip de 22.5 noir
4	A000002	1	Bague diam. 22.5 noire
5	E102037	1	Rallonge époxy (tube alu Ø20x1- L=490 – 5 trous)
6	A000134	1	Embout antibuit
7	A102069	1	Embout Optiflex noir

Edition 1 – déc 2021

