

LED Carla focus (10°)

Lampe d'examen très compacte et robuste qui offre un éclairage très localisé (faisceau 10°) diffusant une lumière blanche de 4500°K (blanc neutre) pour un rendu fidèle des différentes nuances de couleurs des tissus éclairés : Vulves, muqueuse de la paroi vaginale, col de l'utérussans aucune source de chaleur pour un confort maximal des patientes.

Idéale pour les examens qui demandent beaucoup de précision, elle permet de travailler en sur/sous épaule et ainsi d'avoir un éclairage direct localisé sans être gêné par l'emplacement de la lampe (même lors d'une utilisation combinée avec un colposcope).

Idéale pour la gynécologie, les sages femmes, l'obstétrique et l'androgologie

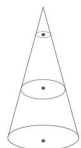
● Dispositif Medical Classe 1

Intensité lumineuse **420 Lumens***

Température de couleur **4500°K* (blanc neutre)**

Indice de rendu des couleurs **IRC 95/100**

Consommation électrique **4.2 Watts**

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
90 000		30 cm	10 cm
27 000		50 cm	15 cm
7 000		100 cm	25 cm

*Tolérance des données +/- 10%



Carla focus 100
interrupteur sans contact



- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-4
EN 60 598-2-25
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 6 x 10 cm
- Fixations possibles :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



RÉFÉRENCES

	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LEDS0650	LEDS0650-ISC
Flexible 100 cm	LEDS0900	LEDS0900-ISC
Flexible 123 cm	LEDS1200	LEDS1200-ISC