


ABENA Let Normal


INCONTINENCE

ABENA Let

Normal

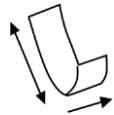

39 x 14 cm

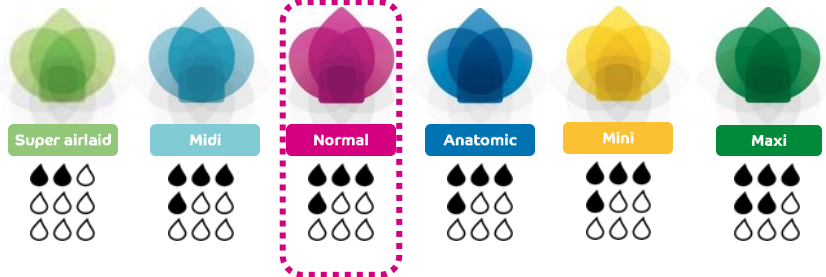

UTILISATEURS

UNISEXE

AUTONOME

PROTECTION TRAVERSABLE


LARGE USAGE

Description

ABENA Let Normal est une protection droite traversable destinée à un large usage. La protection est dotée d'un coussin absorbant permettant de capter une quantité modérée de liquide. L'enveloppe externe est entièrement respirante et faite d'un non-tissé très doux et silencieux. La protection peut être stérilisée.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

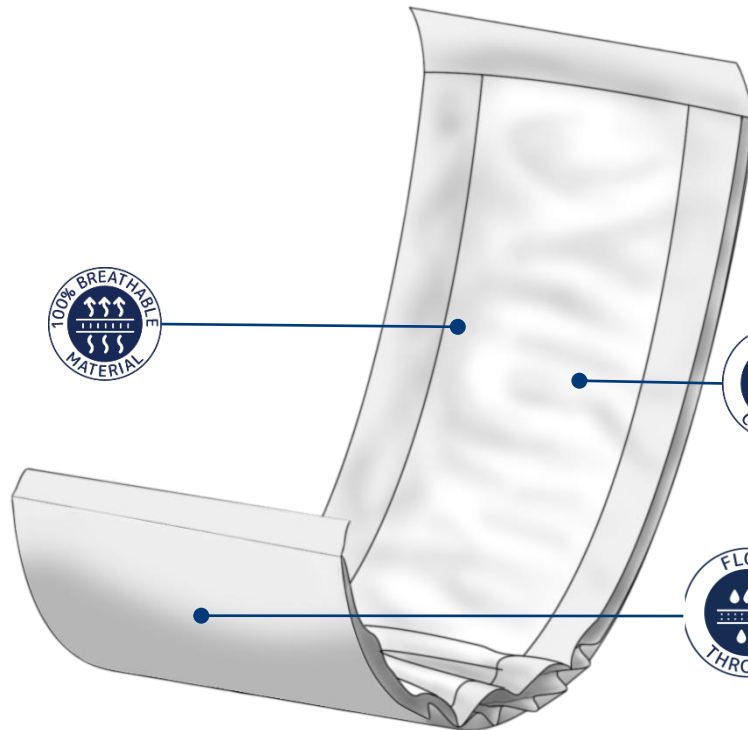

Contrôle des odeurs

Le cœur absorbant encapsule l'urine pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.



Protection traversable

La protection dispose d'une enveloppe externe non-tissé traversable et laisse passer le surplus de liquide.



Écolabellisé Nordic Swan

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.



ABENA Let Normal

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	390 mm – 140 mm
Poids (+/-10%) :	23,1 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	500 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, colle (résine).
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi



Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745



ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485



La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.



Le produit ne contient pas de latex



30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.



Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO² de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydratante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.



ABENA Let Normal

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
34	5713571001288	805	30 x 14,5 x 12	306	4 couches de 14 cartons
Sachets / carton	Code GTIN carton	Poids brut carton (g)	Dimensions carton Long x larg x haut (cm)	Cartons / palette (gerbée)	Hauteur palette (cm)
9	5713571001295	6 552	75 x 29,6 x 37,5	12 (24)	128



GUIDE D'UTILISATION

Peut être utilisée en tant que booster d'absorption dans un produit d'incontinence, mais également en tant que change gynécologique ou tampons absorbant dans le cadre de soin des plaies. Protection traversable.

PRODUITS ASSOCIÉS

Le choix et la combinaison adéquats des protections d'incontinence



Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

